


WOOD-I  [®]
easy

Hochfrequenz Massage- & Vibrationsgerät

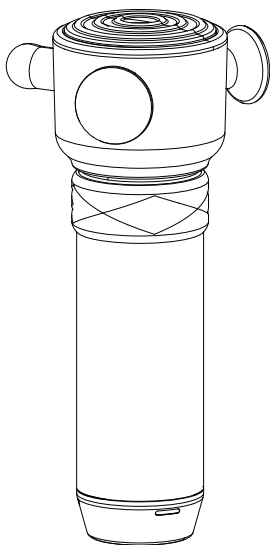

Bedienungsanleitung

Wood-i[®] easy

Hochfrequentes Massage- & Vibrationsgerät

Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheitshinweise - - - - -	2
2.Produktbeschreibung - - - - -	4
3.Verpackungsinhalt - - - - -	5
4.Technische Parameter - - - - -	6
5.Bedienungsanleitung - - - - -	7
6.Häufig gestellte Fragen (FAQ) - - - - -	9
7.Wohlbefinden durch Massage - - - - -	10
8.Worte von Herzen - - - - -	21
9.Garantiekarte - - - - -	22
10.Über uns - - - - -	23

Vielen Dank, dass Sie sich für *Wood-i[®] easy* entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Gebrauch und Garantie. Verwenden Sie das Produkt wie beschrieben und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie den *Wood-i® easy* nicht direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer aus. Halten Sie ihn fern von Wärmequellen.
- Tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine anderen Massageaufsätze als die, die von *Wood-i® easy* zur Verfügung gestellt werden.
- Nur für Erwachsene geeignet. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen oder damit spielen. Verwenden Sie den *Wood-i® easy* nur auf weichem Körpergewebe. Benutzen Sie ihn nicht am Kehlkopf, in den Achselhöhlen, an den Genitalien oder an harten oder knöchernen Körperstellen.
- Verwenden Sie den *Wood-i® easy* in sanften Kreisbewegungen pro Bereich
- Überprüfen Sie behandelte Bereiche häufig und stoppen Sie sofort, wenn Sie das erste Anzeichen von Schmerz oder Unbehagen bemerken.
- Betreiben Sie das Gerät nicht kontinuierlich länger als eine Stunde. Lassen Sie den *Wood-i® easy* vor der Wiederverwendung 10 Minuten ausgeschaltet.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, um das Risiko von Elektroschocks, Explosionen, Chemikalienexposition und anderen Risiken zu vermeiden.
- Lassen Sie den *Wood-i® easy* beim Laden oder Betrieb niemals unbeaufsichtigt. (Bitte laden Sie den *Wood-i® easy* mit dem Original-Ladegerät.)
- Schalten Sie den *Wood-i® easy* zur Aufbewahrung oder auf Reisen aus. Halten Sie ihn ausserhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie den *Wood-i® easy* gemäss den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zum Umweltschutz.

Verwenden Sie das Massagegerät

- Nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung in der zu massierenden Körperregion (z.B. offene Wunde)
- Keinesfalls für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen. Sollte dies der Fall sein, befragen Sie auch für andere Körperbereiche erst Ihren Arzt
- Niemals an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körperpartien
- Nicht bei Risswunden, Kapillaren, Krampfadern, Akne, Couperose (Gefässerweiterung im Bereich der Gesichtshaut) Herpes oder anderen Hauterkrankungen
- Nicht während der Schwangerschaft



- Nicht im Gesicht (Augen), auf dem Kehlkopf oder andere besonders empfindlichen Körperteilen
- Nie während Sie schlafen
- Nicht nach der Einnahme von Medikamenten, Drogen oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit!)
- Nicht im Kraftfahrzeug (Auto)
- Nicht in der Badewanne
- Nicht im Intimbereich
- Bruchgefahr wenn das Gerät auf den Boden fällt.

Befragen Sie vor der Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt. Vor allem,



- wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden,
- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen,
- bei Thrombosen
- bei Diabetes
- bei jeglichen Krebsarten
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache

Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemässen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen. Kurse dafür stehen vor Ort oder Online zur Verfügung. Unter www.wood-i.ch sind alle Kurse ersichtlich.

Produktbeschreibung

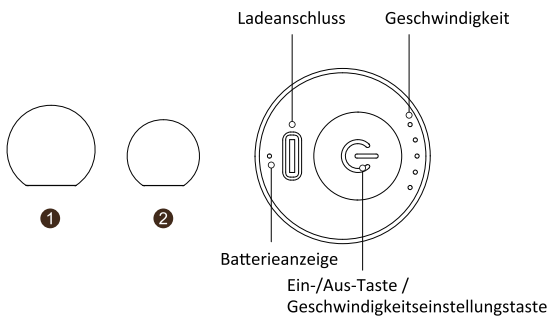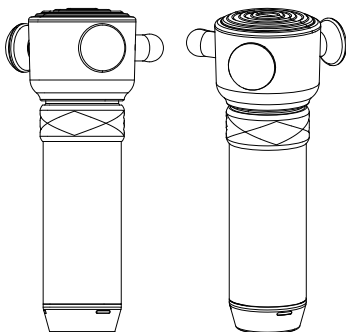

Verpackungsinhalt

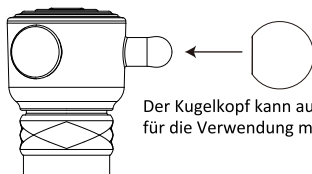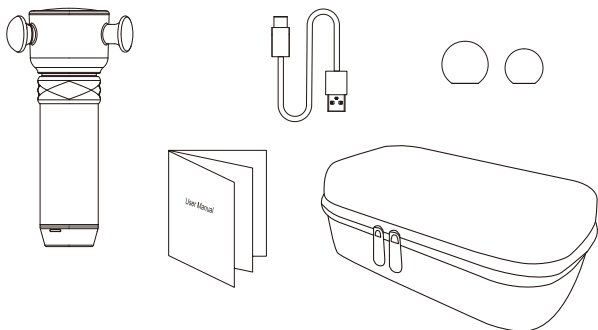


Der Kugelkopf kann auf den Geschoskopf für die Verwendung montiert werden

Technische Parameter von Wood-i® easy

Geschwindigkeitseinstellungen	1-5 Speed Levels
Schlagfrequenz	5500-7500/min
Stoßlänge	3mm(seitlich)
Batteriekapazität	2900mAh
Eingangsspannung	5V- 2A
Nettoartikelgewicht	1.7lbs (0.78kg)
Artikelgröße	5.35*3.9*11.5 inch (136*100*292 mm)

Einzigartige Drucksensortechnologie

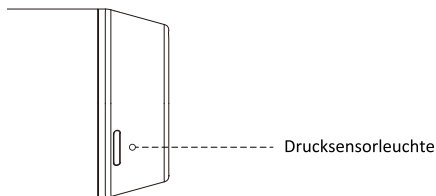


Bei der Verwendung des Geräts zeigt das Drucksensorlicht grün an, dies bedeutet, dass die angewandte externe Kraft angemessen ist; Wenn jedoch das Drucksensorlicht rot wird, achten Sie darauf, ob die angewandte externe Kraft zu gross ist, um Schäden am Körper zu vermeiden.

Bedienungsanleitung zum Aufladen

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Beim Laden blinkt die Batterieanzeige auf der Rückseite. Eine vollständige Ladung ist erreicht, wenn die oberen Lichter der Batterieanzeige aufhören zu blinken.
3. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt abhängig von der Geschwindigkeitsstufe und dem während der Verwendung angewandten Druck 3 Stunden. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt etwa 4-5 Stunden.
4. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
5. Laden Sie den *Wood-i® easy* vollständig auf.

Schritt 1

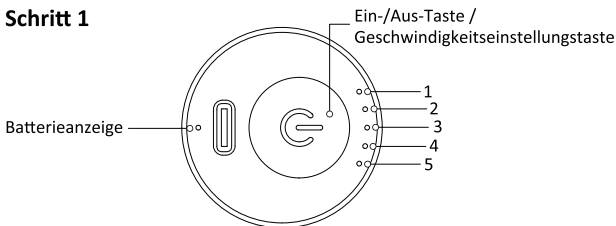

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Batterieanzeige leuchtet auf. Drücken Sie einmal die Geschwindigkeitseinstellungstaste, um das Gerät auf Stufe 1 einzuschalten, zweimal für Stufe 2, dreimal für Stufe 3, viermal für Stufe 4 und fünfmal für Stufe 5. Ein weiteres Drücken der Geschwindigkeitseinstellungstaste versetzt das Gerät in den Standby-Modus. Der Geschwindigkeitsmodus wird durch die 5 LED's angezeigt wird durch den Geschwindigkeitsstufenanzeiger angezeigt.

Schritt 2

Mit der Geschwindigkeitsstufe 1-5 halten Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis:

Im Betriebsmodus schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten ab.

Garantie

WENN INNERHALB VON 24 MONATEN AB DEM KAUF, DIESES PRODUKT AUFGRUND EINES MATERIAL- ODER HERSTELLUNGSFEHLERS AUSFÄLLT, WIRD *Wood-i*® DAS PRODUKT ODER ERFORDERLICHE KOMPONENTEN KOSTENFREI REPARIEREN ODER ERSETZEN
DIE GARANTIE SCHLIESST AUS:

- a. Schäden verursacht durch Unfall, Missbrauch, unsachgemässe Handhabung oder Transport;
- b. Einheiten, die unbefugt repariert oder demontiert wurden;
- c. Einheiten, die nicht gemäss den Anweisungen von *Wood-i*® verwendet wurden;
- d. Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
- e. Verschlechterung des gelieferten Produkts aufgrund abnormaler Lager- und/oder Schutzbedingungen auf dem Gelände des Kunden;
- f. Fehlender Nachweis des datierten Kaufs

Häufig gestellte Fragen (FAQ)


Fragen	Ursachen	Fehlerbehebung
Kann nicht aufgeladen werden	Das Ladegerät ist nicht kompatibel.	Stellen Sie sicher, dass Sie das Original-Ladegerät während des Ladens verwenden.
	Das Stromkabel ist nicht fest eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
Stellt den Betrieb während der Massage ein	Der Akku ist leer.	Bitte laden Sie das Gerät mit dem Original-Ladegerät.
	Drücken Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste	Überprüfen Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste
	Die Druckkraft überschreitet die Stoppkraft, das Gerät schaltet sich aus.	Drücken Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste, um das Gerät wieder einzuschalten
	Das Gerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten kontinuierlichen Gebrauchs aus.	Drücken Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Wenn Sie andere Probleme haben, kontaktieren Sie: hallo@wood-i.ch

Wohlbefinden durch Massage

Training zur Unterstützung der Regeneration


Musculus Pectoralis major

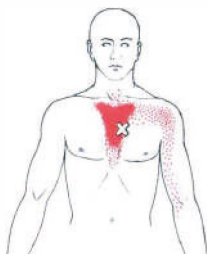

In Gebrauch: Silikonspitze

Auslöseort: Mitte des Muskelbauches des M. Pectoralis major Rot zeigt den Spannungsbereich an, x markiert den Bereich zum Lockern.


Musculus Pectoralis Major

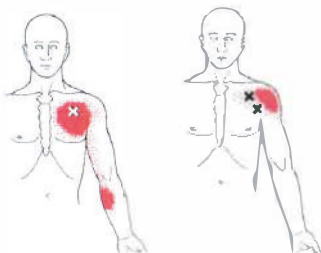

In Gebrauch: Silikonspitze

Auslöseort: Links – Sternokostaler Kopf des Musculus Pectoralis Major.
Rechts – Klavikularer Kopf des Musculus Pectoralis Major.
Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Subscapularis

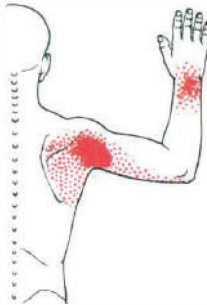


In Gebrauch: Kugelspitze & Flacher Kopf

Auslöseort: Unter dem Schulterblatt, am Bauch des Musculus Subscapularis.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Rectus Abdominis

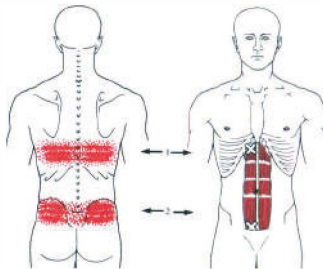


In Gebrauch: Pufferkappe

Auslöseort: Obere und untere Teile des Musculus Rectus Abdominis.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.


Musculus Serratus Posterior Inferior

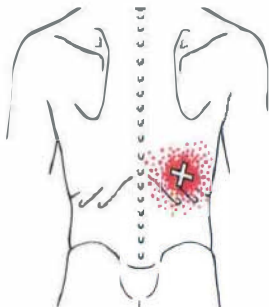

In Gebrauch: Pufferkappe & Kugelspitze
Auslöseort: Oberer Muskelbauch des Musculus Serratus
Posterior Inferior, nahe der 11. Rippe.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum
Lockern.


Musculus Quadratus Lumborum

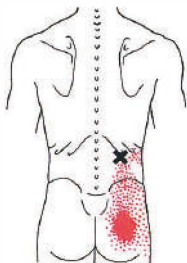

In Gebrauch: Pufferkappe & Kugelspitze
Auslöseort: Quadratus Lumborum, nahe der unteren 12. Rippe.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum
Lockern.

Musculus Gluteus Maximus

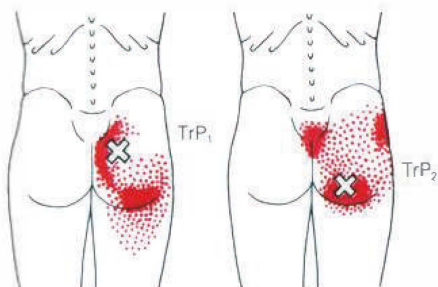


In Gebrauch: Silikonspitze

Auslöseort: Innere obere Seite des Musculus Gluteus Maximus;
mittlerer-unterer Abschnitt des Musculus Gluteus Maximus.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, × kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Quadratus Lumborum

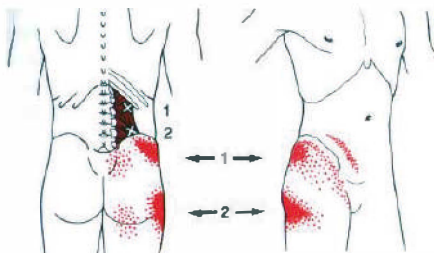


In Gebrauch: Silikonspitze

Auslöseort: Unterhalb des 12. Rippenrandes; neben dem Querfortsatz des 3. Lendenwirbels; oberer Teil des Iliakalkamms.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, × kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Serratus Posterior Superior

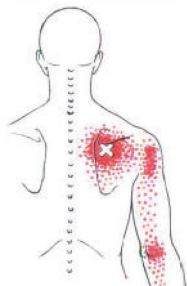


In Gebrauch: Kugelspitze

Auslöseort: Direkt unter dem Schulterblatt, wo es an die Rippen ansetzt.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Serratus Anterior

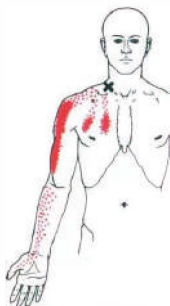


In Gebrauch: Silikonspitze

Auslöseort: Auf den vorderen, mittleren und hinteren Bäuichen des Musculus Serratus Anterior.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Triceps Brachii

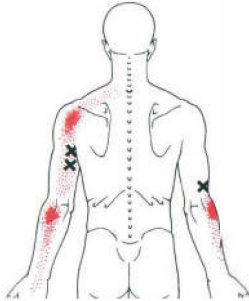


In Gebrauch: Kugelspitze

Auslöseort: Zentraler Bereich des langen Kopfes des Musculus Triceps Brachii.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Extensor Carpi Radialis Longus

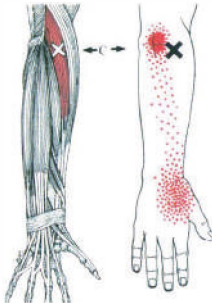


In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze

Auslöseort: Muskelbauch des Musculus Extensor Carpi Radialis Longus.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Flexor Digitorum Superficialis

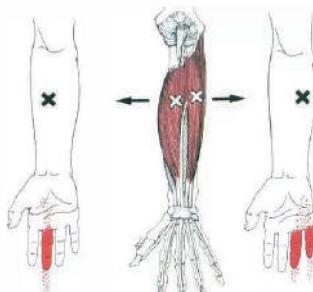


In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze

Auslöseort: Zentraler Teil des Muskelbauches des Musculus Flexor Digitorum Superficialis.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Adductor Pollicis

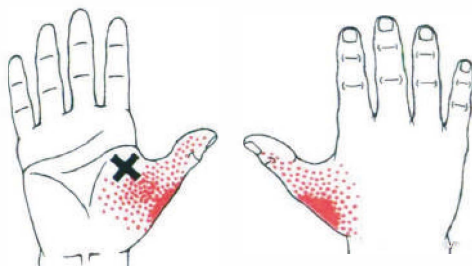


In Gebrauch: Kugelspitze

Auslöseort: Musculus Adductor Pollicis, in der Nähe der Daumenbasis.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.


Adduktorengruppe (Oberschenkel)

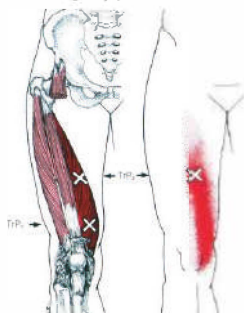

In Gebrauch: Flachkopf & Silikonspitze
Auslöseort: Mitte des Muskelbauches der Adduktoren.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.


Musculus Rectus Femoris

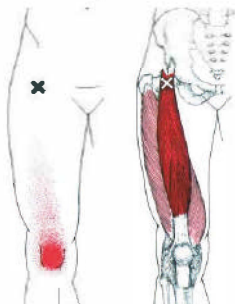

In Gebrauch: Flachkopf & Silikonspitze
Auslöseort: Unterhalb der Spina iliaca anterior inferior.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Tibialis Anterior

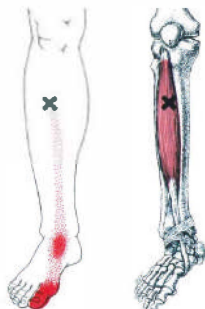

In Gebrauch: Kugelspitze

Auslöseort: Oft im oberen Drittel des Musculus Tibialis Anterior.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Piriformis




In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze

Auslöseort: Innen, nahe dem Sakrum; mittleres Drittel des Musculus Piriformis.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Semitendinosus und Semimembranosus

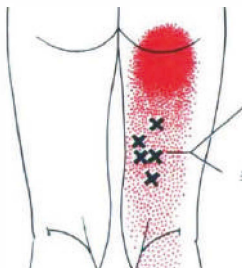


In Gebrauch: Kugelspitze

Auslöser: Zentraler Kreuzungsbereich der Muskelbäuche von Semitendinosus und Semimembranosus.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Soleus

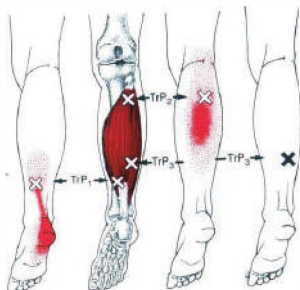


In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze

Auslöser: In der Nähe der Fibula, am oberen Ende des Musculus Soleus; zentraler Muskelbauch in der Nähe der sehnenartigen Kreuzung.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.


Musculus Tibialis Posterior

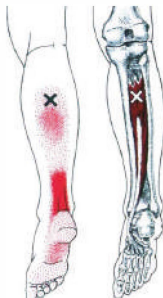

In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze
Auslöseort: Oberhalb des Musculus Tibialis Posterior.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

Musculus Abductor Hallucis

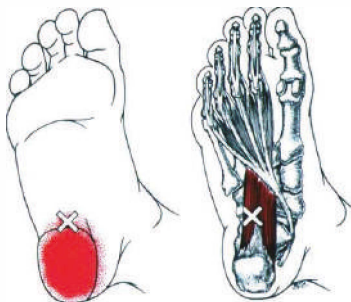

In Gebrauch: Kugelspitze & Silikonspitze
Auslöseort: In der Nähe der Ferse, nahe dem Fussgewölbe.

Rot zeigt den Spannungsbereich an, x kennzeichnet den Bereich zum Lockern.

WORTE VOM HERZEN



Für uns sind Sie das Wichtigste! Jedes Wood-i®-Produkt wird von einer 2-jährigen Garantie und einem freundlichen Kundenserviceteam unterstützt. Unser professionelles Serviceteam ist per Mail unter hallo@wood-i.ch erreichbar. Wenn Sie mit dem bestellten Produkt nicht zufrieden sind, werden wir es gemäss den Garantiebedingungen für Sie umtauschen, ersetzen oder zurückerstatten. Sie müssen uns lediglich das Problem per E-Mail senden. Unser Motto, herzlich und flexibel. Wir werden auftretende Probleme und Fragen schnellstmöglich bearbeiten.

Ihr Wood-i®-Kundenserviceteam.



Problemlösung
Hilfe bei jeglichen Problemen mit Ihrem Gerät.



Produktwissen
Beantwortung von Fragen zu Ihrem Gerät und zu besten Praktiken.



Initiierung von Rücksendungen
Anleitung für Ersatz, Rücksendungen und Rückerstattungen.



Neubestellungen
Hilfe bei der Online-Bestellung und/oder autorisierten Wiederverkäufern.

Kontaktieren Sie uns.

Wenn Sie Fragen zur in Betriebnahme Ihres Wood-i® easy haben, sind wir hier, um Ihnen zu helfen.

Email: hallo@wood-i.ch

Garantiekarte

(Das Gerät ist 24 Monate ab Kaufdatum garantiert, sofern es nicht vom Benutzer beschädigt wurde.)

Name des Empfängers

Kontaktinformation

Adresse des
Empfängers

Rücksendegrund

Rückgabe Ersetzen Reparatur

Rechnungs-ID

Hinweis: Seien Sie versichert, dass die oben genannten Informationen nicht offengelegt werden. Sie werden ausschliesslich für den Kundendienst verwendet.

Über Uns

- Unsere Mission ist es, Menschen ein entspanntes, glückliches Leben zu ermöglichen
- Das Fundament von Wood-i® liegt in unserer Expertise in der Massagetherapie mit einem professionellen Team aus erfahrenen Massagetherapeuten.
- Individuellen Bedürfnissen unserer Nutzer entsprechend, treiben wir die Innovation unserer Produkte stetig an
- In der Zukunft sind wir bestrebt, die Grenzen der Technologie zu erweitern und in noch weitere Horizonte im Massagebereich vorzustoßen

Designed by **WOOD-I** ®
easy 