


WOOD-I  [®]
easy

Hochfrequenz Massage- & Vibrationsgerät

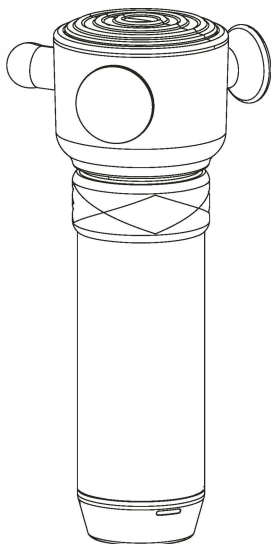

Manuale d'uso Wood-i® easy

Apparecchio per massaggi e vibrazioni ad
alta frequenza

1. Indicazioni di sicurezza-----	2
2. Indicazioni importanti -----	3
3. Descrizione del prodotto -----	5
4. Contenuto della confezione -----	6
5. Parametri tecnici -----	7
6. Istruzioni per l'uso -----	8
7. Domande frequenti (FAQ) -----	10
8. Benessere grazie al massaggio -----	11
9. Parole dal cuore -----	22
10. Scheda di garanzia -----	23
11. Chi siamo -----	24

Grazie per aver scelto Wood-i®easy.
Il presente
manuale d'uso contiene informazioni
importanti relative alla sicurezza, all'
uso e alla garanzia. Utilizzare il prodotto
come descritto
e conservare il manuale per riferimento
futuro.

Avvertenze di sicurezza


● Non esporre Wood-i® easy alla luce diretta del sole o a fiamme libere. Tenere lontano da fonti di calore. ● Non immergerlo in acqua. ● Non utilizzare accessori per massaggi diversi da quelli forniti da Wood-i® easy. ● Adatto solo per adulti. I bambini non devono utilizzare il dispositivo né giocarci. Utilizzare Wood-i® easy solo sui tessuti molli del corpo. Non utilizzarlo sulla laringe, sulle ascelle, sui genitali o su parti del corpo dure o ossee. ● Utilizzare Wood-i® easy con delicati movimenti circolari su ciascuna zona. ● Controllare frequentemente le zone trattate e interrompere immediatamente l'uso al primo segno di dolore o fastidio. ● Non utilizzare il dispositivo in modo continuativo per più di un'ora. Lasciare spento il Wood-i® easy per 10 minuti prima di riutilizzarlo. ● Non rimuovere le viti e non tentare di smontare il dispositivo per evitare il rischio di scosse elettriche, esplosioni, esposizione a sostanze chimiche e altri pericoli. ● Non lasciare mai incustodito il Wood-i® easy durante la ricarica o il funzionamento. (Si prega di caricare Wood-i® easy con il caricabatterie originale). ● Spegnere Wood-i® easy per riporlo o trasportarlo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. ● Smaltire Wood-i® easy in conformità con le leggi e le normative locali in materia di protezione ambientale.

Informazioni importanti sull'


utilizzo del vostro Wood-i® easy

Spia rossa sul manico

Se la spia luminosa è rossa, la pressione è troppo alta. Ridurre leggermente la pressione; il Wood-i easy vi sta segnalando che vuole proteggervi.

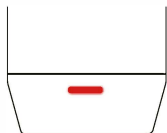

Rosso Alta pressione

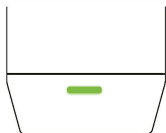

Verde Bassa pressione

Spegnimento automatico Dopo 10 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente per motivi di sicurezza. È sufficiente riaccenderlo e continuerà a funzionare.



Spegnimento automatico Dopo 10 minuti

Utilizzare il massaggiatore

- Non utilizzare in caso di alterazioni patologiche o lesioni nella zona del corpo da massaggiare (ad es. ferite aperte).
- Non utilizzare in nessun caso per massaggi nella zona cardiaca se si indossa un pacemaker. In tal caso, consultare il medico anche per altre zone del corpo.
- Non utilizzare mai su zone della pelle e del corpo gonfie, ustionate, infiammate o lesionate.
- Non utilizzare in caso di lacerazioni, capillari, vene varicose, acne, couperose
- (dilatazione dei vasi sanguigni nella zona del viso), herpes o altre malattie della pelle
- Non utilizzare durante la gravidanza
- Non utilizzare sul viso (occhi), sulla laringe o su altre parti del corpo particolarmente sensibili
- Non utilizzare mai durante il sonno
- Non dopo l'assunzione di farmaci, droghe o alcol
- (capacità di percezione limitata!)
- Non in un veicolo a motore (auto)
- Non nella vasca da bagno
- Non nelle parti intime
- Pericolo di rottura se il dispositivo cade a terra.



Prima di utilizzare il massaggiatore, consultare il proprio medico. Soprattutto

- se soffrite di una malattia grave,
- se avete un pacemaker, impianti o altri dispositivi medici,
- in caso di trombosi
- in caso di diabete
- in caso di qualsiasi tipo di tumore
- in caso di dolori di origine sconosciuta bei Schmerzen ungeklärter Ursache



L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nel presente manuale d'uso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un uso improprio o incauto. I corsi sono disponibili in loco o online.

Tutti i corsi sono disponibili all'indirizzo www.wood-i.ch.

Descrizione del prodotto

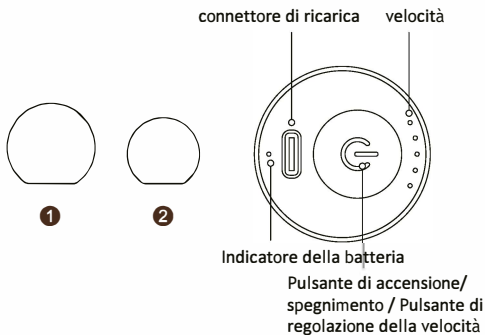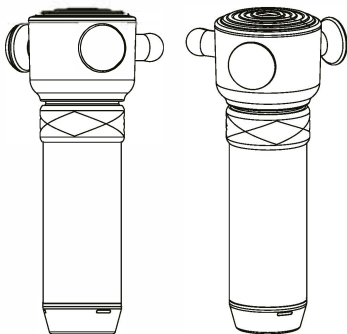

Contenuto della confezione

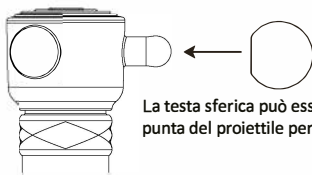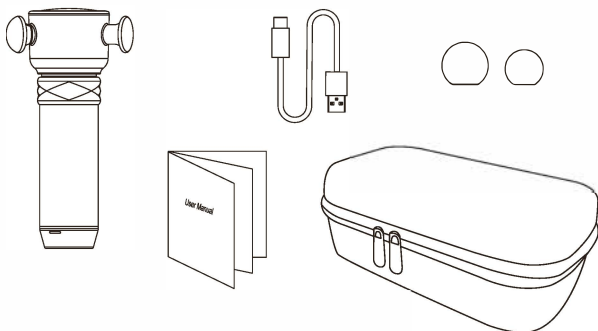


La testa sferica può essere montata sulla punta del proiettore per l'uso.

Parametri tecnici di Wood-i® easy

Impostazioni della velocità	1-5 Speed Levels
frequenza di battito	5500-7500/min
lunghezza di spinta	3mm(laterale)
capacità della batteria	2900mAh
tensione di ingresso	5V- 2A
Peso netto dell'articolo	1.7lbs (0.78kg)
Dimensioni dell'articolo	3.86×3.31×8.54 inch (98*84*217 mm)

Tecnologia esclusiva dei sensori di pressione

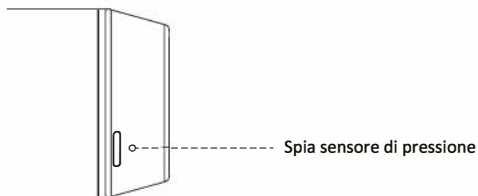


Durante l'utilizzo del dispositivo, la spia del sensore di pressione si illumina di verde, indicando che la forza esterna applicata è adeguata; tuttavia, se la spia del sensore di pressione diventa rossa, verificare che la forza esterna applicata non sia eccessiva, al fine di evitare danni al corpo.

Istruzioni per l'uso relative alla ricarica

1. Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
2. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria sul retro lampeggia. La ricarica è completa quando le luci superiori dell'indicatore della batteria smettono di lampeggiare.
3. L'autonomia media è di 3 ore, a seconda della velocità e della pressione applicata durante l'uso. Il tempo medio di ricarica è di circa 4-5 ore.
4. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
5. Caricare completamente Wood-i® easy.

Passo 1

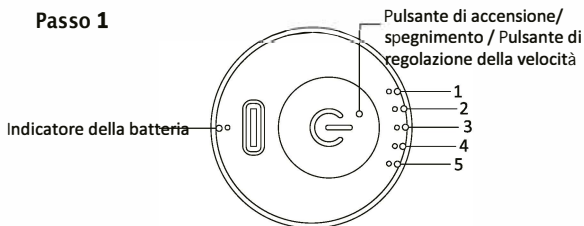

Tenere premuto il tasto di accensione/spengimento per 2 secondi, l'indicatore della batteria si illumina. Premere una volta il tasto di regolazione della velocità per accendere il dispositivo al livello 1, due volte per il livello 2, tre volte per il livello 3, quattro volte per il livello 4 e cinque volte per il livello 5. Premendo nuovamente il tasto di regolazione della velocità, il dispositivo entra in modalità standby. La modalità di velocità è indicata dai 5 LED e dall'indicatore del livello di velocità.

Passo 2

Passo 2 Con il livello di velocità 1-5, tenere premuto il pulsante di regolazione della velocità per 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Nota:

in modalità operativa, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti. **GARANZIA SE ENTRO 24 MESI DALL'ACQUISTO IL PRODOTTO PRESENTA UN DIFETTO DI MATERIALE O DI FABBRICAZIONE, Wood-i® PROVVEDERÀ ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE GRATUITA DEL PRODOTTO O DEI COMPONENTI NECESSARI**
LA GARANZIA ESCLUDE:

- a. Danni causati da incidenti, uso improprio, manipolazione o trasporto inadeguati; b. Unità riparate o smontate senza autorizzazione; c. Unità non utilizzate secondo le istruzioni di Wood-i®; d. Danni che superano il costo del prodotto; e. Deterioramento del prodotto consegnato a causa di condizioni di stoccaggio e/o protezione anomale presso la sede del cliente; f. Mancata presentazione della prova di acquisto datata.


Domande frequenti (FAQ)

Domande	Cause	Risoluzione dei problemi
Impossibile ricaricare	Il caricabatterie non è compatibile.	Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie originale durante la ricarica.
	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
rappresenta il Funzionamento durante il dispositivo	La batteria è scarica.	Si prega di ricaricare il dispositivo con il caricabatterie originale.
	Premere il tasto di regolazione della velocità.	Überprüfen Sie die Geschwindigkeitseinstellungstaste
	si spegne quando la forza di pressione supera la forza di arresto del massaggio.	Premere il tasto di regolazione della velocità per riaccendere l'apparecchio.
	Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo	Premere il tasto di regolazione della velocità per riaccendere l'apparecchio.

Benessere grazie al massaggio


Allenamento professionale per la riabilitazione

Musculus Pectoralis major

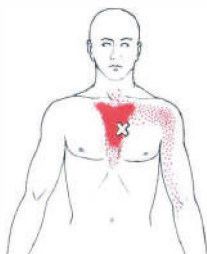


In uso: punta in silicone Punto di rilascio:
centro del ventre muscolare del muscolo grande pettorale Il rosso
indica la zona tesa, la x segna l'area da rilasciare.

Musculus Pectoralis Major

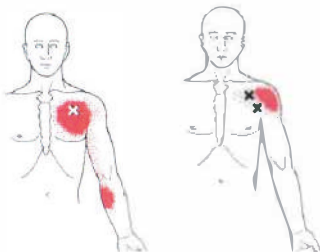


In uso: punta in silicone Punto di rilascio:
a sinistra - testa sternocostale del muscolo grande pettorale. A destra -
testa clavicolare del muscolo grande pettorale.
Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Subscapularis

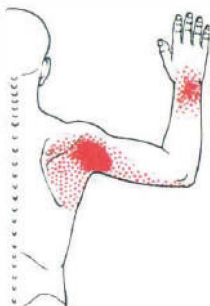


In uso: punta sferica e testa piatta Punto di rilascio:
Parte centrale sinistra del muscolo grande pettorale. Il rosso indica la
zona tesa, la x indica la zona da rilasciare.

Musculus Rectus Abdominis

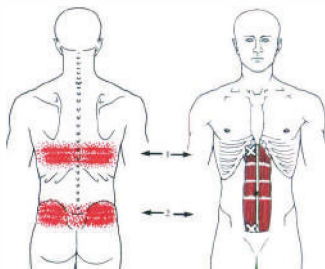


In uso: cappuccio ammortizzante Punto di rilascio:
parti superiore e inferiore del muscolo retto dell'addome. Il rosso indica
la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Serratus Posterior Inferior

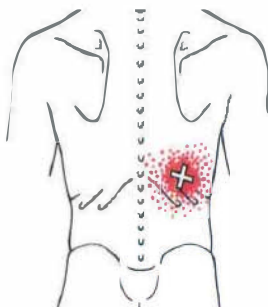


In uso: cappuccio ammortizzante e punta sferica
Punto di rilascio: parte superiore del muscolo serrato posteriore inferiore, vicino all'undicesima costola. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Quadratus Lumborum

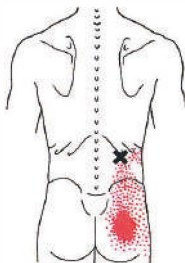

In uso: cappuccio ammortizzante e punta sferica
Punto di tensione: muscolo quadrato dei lombi, in prossimità della dodicesima costola inferiore. Il rosso indica la zona tesa, la x l'area da trattare.


Musculus Gluteus Maximus

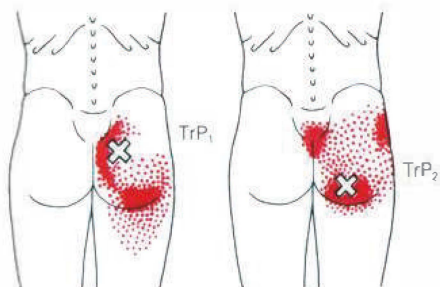

In uso: punta in silicone Punto di attivazione:

Punto di tensione: muscolo gluteo massimo; sezione medio-inferiore del muscolo gluteo massimo. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da trattare.

Musculus Quadratus Lumborum

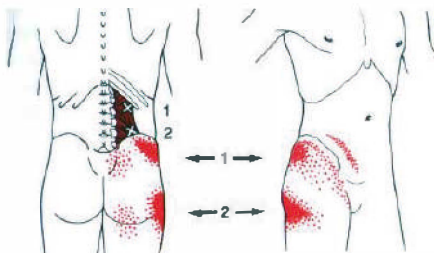


In uso: punta in silicone

Punto di rilascio:

sotto il bordo della dodicesima costola; accanto al processo trasverso della terza vertebra lombare; parte superiore della cresta iliaca. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Serratus Posterior Superior

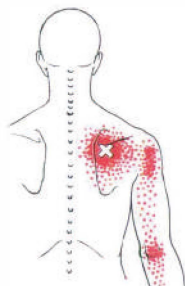


In uso: punta a sfera

Punto di tensione: direttamente sotto la scapola, dove si attacca alle costole.

Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da trattare.


Musculus Serratus Anterior

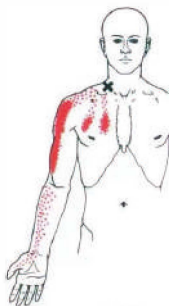

In uso: punta in silicone

Punto di tensione: sulla parte anteriore, centrale e posteriore dell'addome del muscolo serrato anteriore. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.


Musculus Triceps Brachii

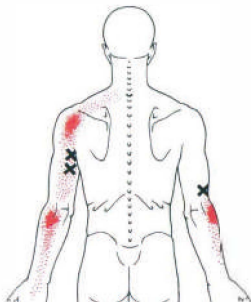

In uso: punta sferica

Punto di tensione: zona centrale della testa lunga del muscolo tricipite brachiale. Il rosso indica la zona tesa, la x indica la zona da rilasciare.


Musculus Extensor Carpi Radialis Longus

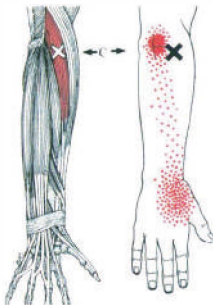

In uso: punta sferica e punta in silicone


Punto di tensione: ventre muscolare del muscolo estensore radiale lungo del carpo. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Flexor Digitorum Superficialis

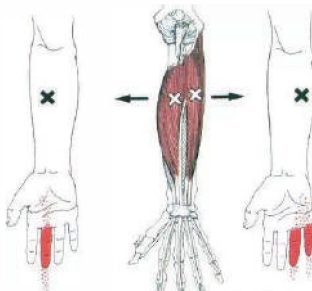


In uso: punta sferica e punta in silicone
Punto di tensione: parte centrale del ventre muscolare del muscolo flessore superficiale delle dita.
Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Adductor Pollicis

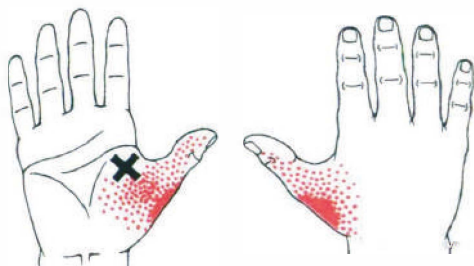

In uso: punta sferica
Punto di tensione: muscolo adduttore del pollice, vicino alla base del pollice. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.


Gruppo degli adduttori (coscia)

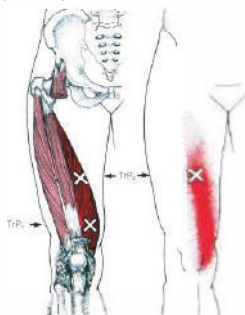

In uso: testa piatta e punta in silicone

Punto di tensione: centro della parte muscolare degli adduttori. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.


Musculus Rectus Femoris

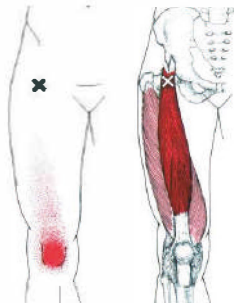

In uso: testa piatta e punta in silicone

Punto di tensione: sotto la spina iliaca anteriore inferiore. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.


Musculus Tibialis Anterior

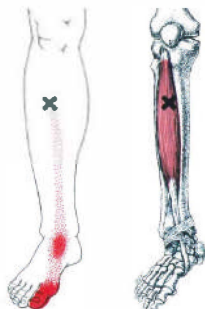

In uso: punta sferica

Punto di tensione: spesso nel terzo superiore del muscolo tibiale anteriore. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Piriformis

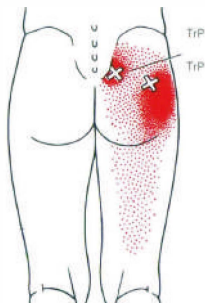

In uso: punta sferica e punta in silicone

Punto di tensione: interno, vicino al sacro; terzo medio del muscolo piriforme. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.


Musculus Semitendinosus e Semimembranosus



In uso: punta sferica

Punto di tensione: zona centrale di intersezione dei muscoli semitendinoso e semimembranoso. Il rosso indica la zona tesa, la x indica la zona da rilasciare.

Musculus Soleus

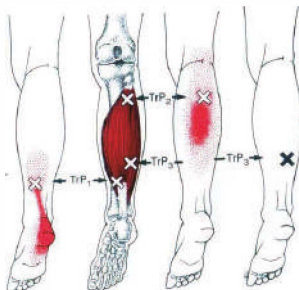

In uso: punta sferica e punta in silicone


Punto di tensione: vicino al perone, all'estremità superiore del muscolo soleo; ventre muscolare centrale vicino all'incrocio tendineo. Il rosso indica la zona tesa, la x indica l'area da rilasciare.

Musculus Tibialis Posterior



In uso: punta sferica e punta in silicone
 Punto di tensione: sopra il muscolo tibiale posteriore. Il rosso indica la zona tesa, a x indica l'area da rilasciare.

Musculus Abductor Hallucis

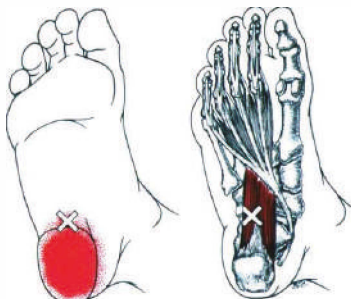

In uso: punta sferica e punta in silicone
 Punto di tensione: vicino a talone, in prossimità de l'arco plantare. Il rosso indica la zona tesa, a x indica l'area da rilasciare.

PAROLE DAL CUORE



Per noi, voi siete la cosa più importante! Ogni prodotto Wood-i® è coperto da una garanzia di 2 anni e assistito da un cordiale team di assistenza clienti. Il nostro team di assistenza professionale è raggiungibile via e-mail all'indirizzo hallo@wood-i.ch. Se non sei soddisfatto del prodotto ordinato, lo cambieremo, lo sostituiremo o ti rimborseremo secondo i termini della garanzia. Devi solo inviarci il problema via e-mail. Il nostro motto: cordialità e flessibilità. Risolveremo eventuali problemi e domande il più rapidamente possibile. Il tuo team di assistenza clienti Wood-i®.



Risoluzione dei problemi
Assistenza per qualsiasi problema con il vostro dispositivo.



Informazioni sul prodotto
Risposte alle domande sul tuo dispositivo e sulle migliori pratiche.



Avvio dei resi Istruzioni per sostituzioni, resi e rimborsi.



Nuovi ordini Assistenza per gli ordini online e/o i rivenditori autorizzati.

Contattaci.

Se hai domande sulla messa in funzione del tuo Wood-i® easy, siamo qui per aiutarti.

Email: hallo@wood-i.ch

Scheda di garanzia

(Il dispositivo è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto, a condizione che non sia stato danneggiato dall'utente.)

Nome del destinatario

Informazioni di contatto

Indirizzo

Motivo del reso

Restituzione Sostituire riparazione

Fattura ID

Nota: vi assicuriamo che le informazioni sopra riportate non saranno divulgate. Saranno utilizzate esclusivamente per il servizio clienti.

Chi siamo

- La nostra missione è aiutare le persone a vivere una vita felice e rilassata.
- Wood-i® si basa sulla nostra esperienza nella massoterapia, che mettiamo in pratica con un team di massaggiatori professionisti esperti.
- Sviluppiamo costantemente i nostri prodotti in base alle esigenze individuali dei nostri utenti.
- In futuro, continueremo a spingerci oltre i limiti della tecnologia ed esplorare nuove strade nel campo del massaggio.

Designed by **WOOD-I**  [®]
easy 